


BILANCIA PESAPERSONE MECCANICA

QUALITA' E PRECISIONE DEL PESO

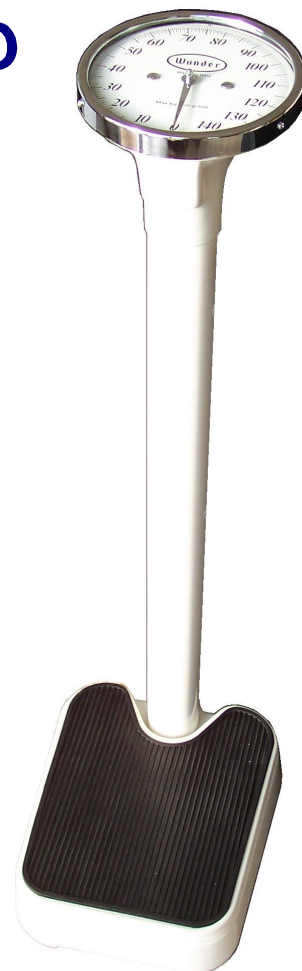

CARATTERISTICHE

Pesapersone ad orologio dal prestigioso design che la rende unica al mondo.

Struttura robusta in alluminio verniciato con pedana in gomma atossica antiscivolo.

Sistema di pesata con leve in alluminio e coltelli in acciaio zincato lavorati a mano per garantire un perfetto funzionamento nel tempo.

Misurazione del peso con sistema interno a doppia molla con cremagliera in ottone e pignone in acciaio temperato per mantenere la precisione nel tempo

Grande quadrante Ø 180 mm di facile lettura

La vite di messa a zero è di facile regolazione

Piedini in gomma antiscivolo ed antigraffio

Portata massima: 150 kg

Sensibilità: 500 g

Precisione: ± 1

Dimensioni totali: mm 270 x 400 x 900 H

Dimensioni pedana: mm 270 x 400 x 110

Peso: 7,2 kg



OPTIONAL: Versione verniciata, cromata e dorata

Distribuito da: *Roversi Elettro Medicali* - Fiorano (MO) - ☎ 0536.830142